

MERYcare Classic to zaawansowany, **poziomy** lub pionowy panel nadłóżkowy stworzony z myślą o specyfice pracy na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM/ICU). Łączy wysoką jakość wykonania, funkcjonalność i ergonomię, wspierając personel w działaniach wymagających szybkości, precyzji i niezawodności.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Korpus wykonany z profili aluminiowych anodowanych lub malowanych proszkowo montowanych bezpośrednio do ściany
- Pokrywa gazowa malowana proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL
- Ilość wejść instalacyjnych zależna od konfiguracji i wyposażenia panelu
- Wymiary:
- Długość paneli (standardowo): 1-stanowiskowy – 2000 mm,
- Panele wielostanowiskowe o niestandardowych długościach
- Głębokość: 110 mm
- Wysokość: 240 / 270 / 370 / 400 mm – zależnie od konfiguracji

PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI

- Systemy PPG: AGA / DIN / BS / AFNOR / inne
- Umieszczenie PPG od strony korytarza

OPCJONALNE OŚWIETLENIE

- Rodzaje oświetlenia: LED / 2G11
- Konfiguracja oświetlenia: ogólne, miejscowe, nocne
- Załączanie oświetlenia realizowane włącznikiem/przyciskiem na panelu i/lub ścianie i/lub manipulatorem systemu przyzywowego

CECHY SZCZEGÓLNE


- Gniazda elektryczne i teletechniczne montowane pod kątem 25 stopni do podłoża

WYPOSAŻENIE TYPOWE DLA SAL SZPITALNYCH


- Panel jedno stanowiskowy 2000 mm - zalecany
- Punkty poboru gazów medycznych - 2x O₂, 2x AIR, 2x VAC
- Gniazdo elektryczne 230 V - 6 szt. (2 obwody)
- Gniazdo ekwipotencjalne - 2 szt.
- Gniazdo teletechniczne RJ-45, kat. 6 - 2 szt.
- Oświetlenie ogólne 1x 24W LED, 4400 lm, Ra>90: włącznik na panelu
- Oświetlenie miejscowe 1x 12W LED, 2200 lm, Ra>90: włącznik na panelu
- Oświetlenie nocne 1x 4W LED, 300 lm: włącznik na panelu
- Otworowanie pod system przyzywoy
- Szyna medyczna montowana na panelu – 2 szt.

GNIAZDA ELEKTRYCZNE I TELETECHNIKA

- Gniazda elektryczne: Typ E (FR) / Typ F (Schuko) / Typ G (BS) / inne
- Gniazda IT: RJ-11 / RJ-12 / RJ-45, kategoria 6a lub wyższa
- Gniazda multimedialne: USB, HDMI, inne
- System przyzywoy według wymagań klienta

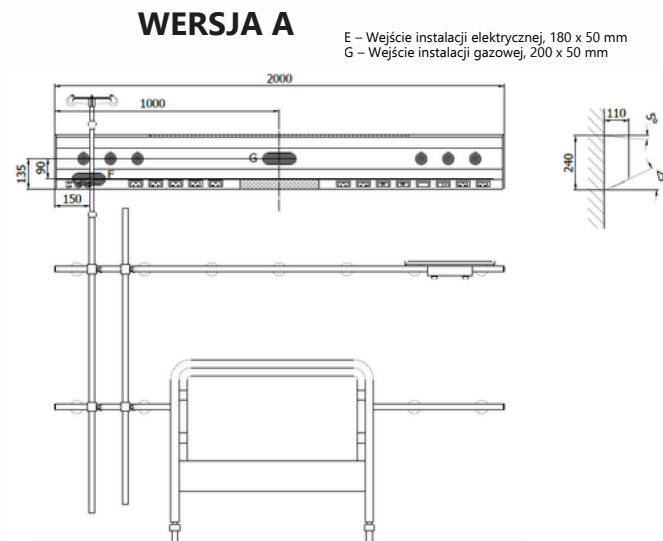

WERSJA B (lustrzane odbicie)

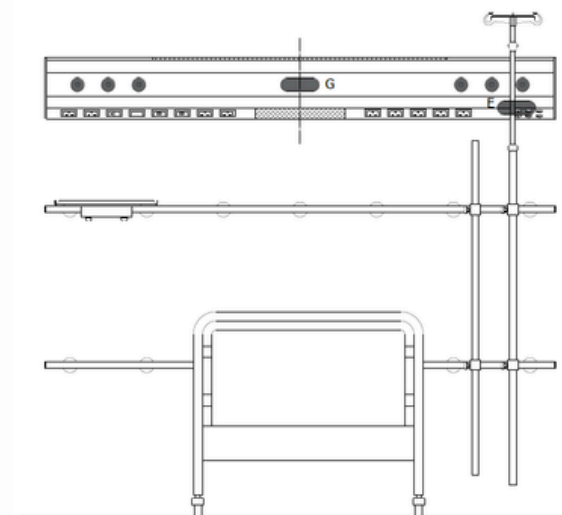

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Szyny medyczne wykonane ze stali kwasoodpornej montowane na panelu i/lub ścianie
- Dodatkowy osprzęt: półki (w tym półki z szufladami) o różnych rozmiarach i nośnościach, lampy do wkluc, ramiona przegubowe do monitorów, wysięgniki do płynów infuzyjnych, kosze na materiały jednorazowe